

Термометр в инфракрасном отношении на лбу для тела, объектов и температуры окружающей среды

1 второе измерение



Функции

Медекспро жт004 термометр, в дополнение к надежности, точности и простоте обработки, позволяет мягкое и неинвазивное измерение температуры тела без прикосновения к пациенту.

1 сек.

Быстрое и мягкое измерение всего за 3 секунды.

3 in 1

Многофункциональные

Измерение лба, объектов и температура окружающей среды в секундах.



30 памяти данных

Автоматическое хранение последних 30 значений измерений с датой и временем.



Спецификации:

Измерение без сенсорного ввода только на 1 сек.

Многофункциональное (тело, объект и температура окружающей среды)
Отслеживание света-для удобства пользования также ночью

Клинические испытания и Рекомендуются врачами
Технология бесшумных светящихся™ и лихорадка

Отображение большого освещения с датой и временем
30 память данных (хранится с датой/временем)


Управление звуком (вкл/откл)
Необязательно: чехол для хранения или пакет хранения

МО. No: NC 150
Размер: 141,1 x 43,3 x 36,9 мм
Вес: 90г (с батареей), 67г (с батареей w/o)
Диапазон измерения: 0-100,0 °с
Точность измерения: ± 0,2 °с от 36,0 до 39,0 °с
Батарея: 2 x 1,5 V щелочные батареи, размер AAA

Инструкции пользователя:


Шаг 1:

Для переключения режима между режимом лба и режимом объекта можно нажать кнопку "режим".
Нажмите кнопку питания или кнопку "Пуск", после отображения полного экрана термометр теперь готов к новому измерению. Если существует аномальное, то появляется EP1 или ep2.

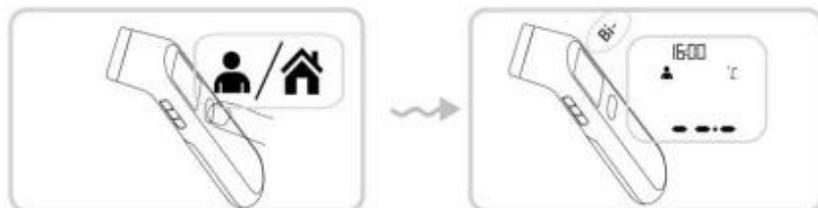

Шаг 2:

Временная артерия соединяется с сердцем через сонную артерию. Он предназначен для измерения поверхности кожи вокруг височной артерии, главной артерии головы. Прицельтесь термометр в центр лба с расстоянием от 2 до 3 см и нажмите кнопку "Пуск". Примечание: не удаляйте термометр из лба до того, как будет слышен последний звуковой сигнал.

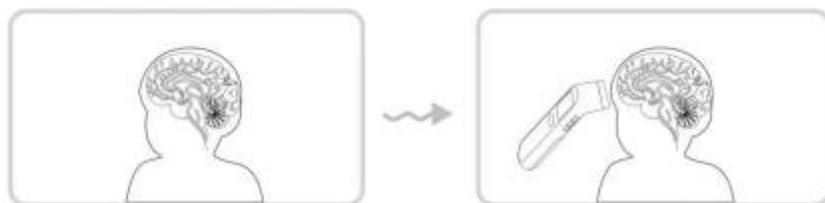

Шаг 3:

Прочтите температуру на дисплее.

1. Если температура в чтении ниже $37,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($100,0\text{ }^{\circ}\text{F}$), то рядом с чтением будет отображаться счастливое лицо.
2. Если температура в чтении составляет $37,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($100,0\text{ }^{\circ}\text{F}$) или выше, то рядом с чтением будет отображаться неверное лицо.



Шаг 4:

Чтобы продлить срок работы батареи, нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство после завершения тестирования. Если никакие действия не принимаются, группа будет автоматически выключена через 1 минут.
Храните термометр в его чехле.