

Новый дизайн Маска шеи Вт103 Оптовая торговля в Китае

- Уникальная конструкция формы позволяет проделать недостаточное профиле и хорошую посадки.
- Повышение удобства в связи с легко регулируемым мостом носа
- Высокой плотности и высокой степени деградации для ТЧ2, 5




Функции

Проектирование

Многослойная ткань и мелтбловн, всего 4 слоя

Форма удержания алюминиевого ремня

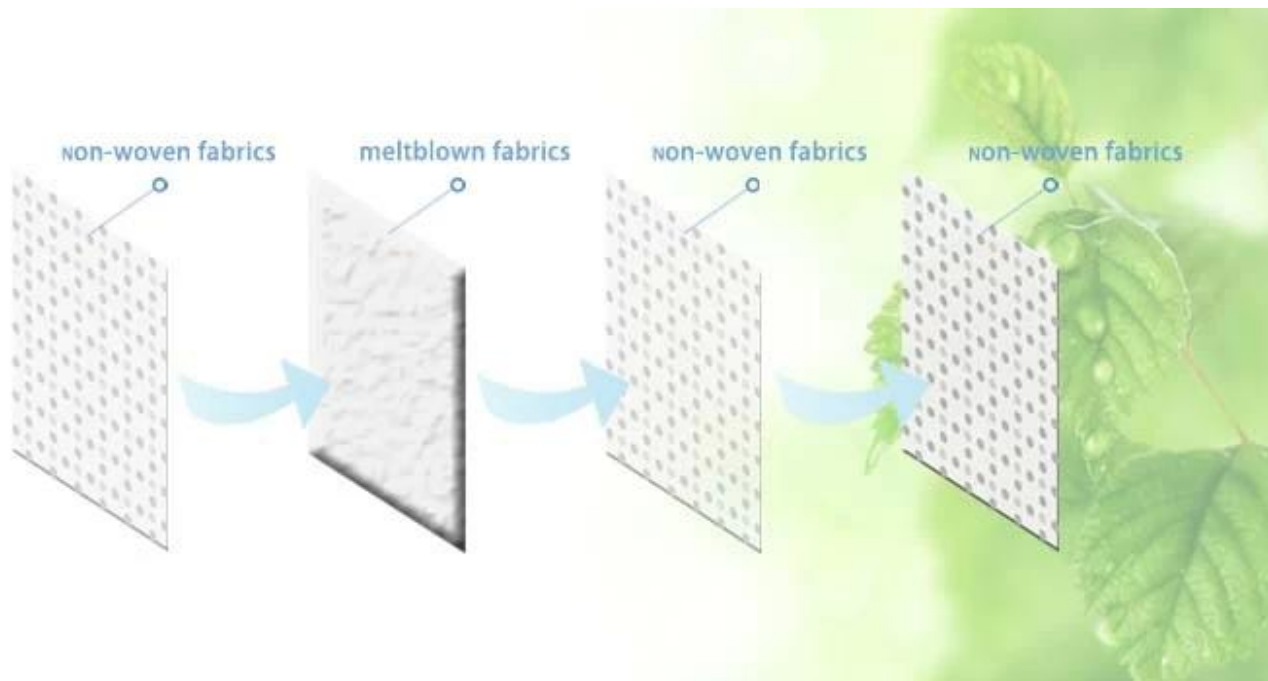

Использование ограничений и предупреждений

1. прежде чем использовать этот респиратор, этот износ должен быть подготовлен в надлежащем использовании и испытании на пригодность.
2. Do не использовать это [респиратор](#) когда концентрация загрязняющих веществ непосредственно опасна для жизни или здоровья.
3. немедленно покинуть контаминтед район, если дыхание становится затруднительным, или головокружение или другое бедствие.
4. Удаление и замена респираторного аппарата, если он становится поврежденным или сопротивление дыхания становится чрезмерным.
5. Проверка респираторного аппарата перед каждым использованием, чтобы обеспечить его надлежащее рабочее комдитион. Изучите все части респиратора для признаков повреждения, включая две ляжки, носеклип и скрепки.
6. Do не изменять, стирать, злоупотреблять и использовать этот аппарат искусственного дыхания.
7. Do не используется с бородой или другими лицами на лицевой стороне или другими условиями, препятствующими хорошей печати между лицом и краем респираторного аппарата.

Предупреждения:

Этот респиратор помогает защититься от определенных частиц, неправомерное использование может привести к болезни или смерти.

Guard your family and your health

Prevention of UV rays Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions



Действия по использованию

Выполнять гигиену рук перед помещением [Маск](#).

Выберите правильный размер маски и убедитесь, что нет дефектов.

1. Держите vt103 в ладони с носепице на кончиках пальцев, которые свободно находятся под рукой.

2. Поместите 103В под подбородок с носепице.

Держа vt103 на месте, вытяните две лямки над каждым ухом.

3. и потяните обруч к другой лямке, сделайте ее на шее.

4. Если у вас длинные волосы, ремень должен быть расположен под вашими волосами.

Поместите vt103 низко в нос.

5. используя обе руки, носепице к форме носа, толкая вниз и наружу.

При перемещении кончиков пальцев на обеих сторонах носепице.

6. Выполните проверку посадки, поместив обе руки целиком над маской.

Будьте осторожны, не нарушайте позицию и выдохните резко.

Если аирлеакс вокруг своего носа, настройте носепице, как описано в шаге 5.

Если на краях маски протекает воздух, отрегулируйте ремни обратно по бокам головы.

Повторно выполните проверку посадки, если корректировка выполнена.

Помнишь:

Надеть маску правильного размера

Проверка посадки обязательна для всех пользователей vt103 маски и должна выполняться каждый раз при ношении.

Выполнить ручную гигиенафтер, надевая маску.

