

Идеальный дизайн в Китае vt103, изготовитель шеи

- Уникальная конструкция формы позволяет проделать недостаточное профиле и хорошую посадки.
- Повышение удобства в связи с легко регулируемым мостом носа
- Высокой плотности и высокой степени деградации для TЧ2, 5




Функции

Проектирование

Многослойная ткань и мелтбловн, всего 4 слоя

Форма удержания алюминиевого ремня

4 layers protection

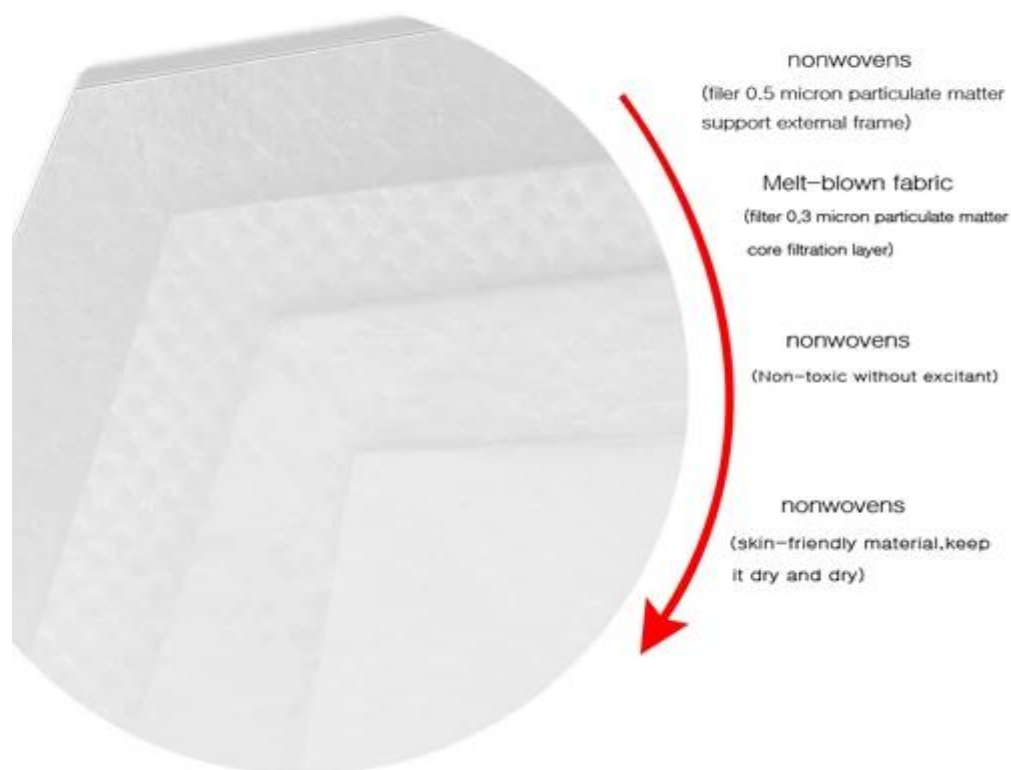

Использование ограничений и предупреждений

1. прежде чем использовать этот респиратор, этот износ должен быть подготовлен в надлежащем использовании и испытании на пригодность.
2. Do не использовать этот аппарат искусственного дыхания, когда концентрация загрязняющих веществ непосредственно опасна для жизни или здоровья.
3. немедленно покинуть контаминтед район, если дыхание становится затруднительным, или головокружение или другое бедствие.
4. Удаление и замена респираторного аппарата, если он становится поврежденным или сопротивление дыхания становится чрезмерным.
5. Проверка респираторного аппарата перед каждым использованием, чтобы обеспечить его надлежащее рабочее комдитион. Изучите все части респиратора для признаков повреждения, включая две лямки, носеклип и скрепки.
6. Do не изменять, стирать, злоупотреблять и использовать этот аппарат искусственного дыхания.
7. Do не используется с бородой или другими лицами на лицевой стороне или другими условиями, препятствующими хорошей печати между лицом и краем респираторного аппарата.

Предупреждения:

Этот респиратор помогает защититься от определенных частиц, неправомерное использование может привести к болезни или смерти.

No longer do the human vacuum cleaner



Действия по использованию

Проведите гигиену рук перед тем, как надеть маску.

Выберите правильный размер маски и убедитесь, что нет дефектов.

1. Держите vt103 в ладони с носеписце на кончиках пальцев, которые свободно находятся под рукой.

2. Поместите 103В под подбородок с носеписце.

Держа vt103 на месте, вытяните две ляжки над каждым ухом.

3. и потяните обруч к другой ляжке, сделайте ее на шее.

4. Если у вас длинные волосы, ремень должен быть расположен под вашими волосами. Поместите vt103 низко в нос.

5. используя обе руки, носеписце к форме носа, толкая вниз и наружу.

При перемещении кончиков пальцев на обеих сторонах носеписце.

6. Выполните проверку посадки, поместив обе руки целиком над маской.

Будьте осторожны, не нарушайте позицию и выдохните резко.

Если аирлеакс вокруг своего носа, настройте носеписце, как описано в шаге 5.

Если на краях маски протекает воздух, отрегулируйте ремни обратно по бокам головы.

Повторно выполните проверку посадки, если корректировка выполнена.

Помнишь:

Надеть маску правильного размера

Проверка посадки обязательна для всех пользователей вт103 маски и должна выполняться каждый раз при ношении.

Выполнить ручную гигиенафтер, надевая маску.

