

Китай-изготовитель 103V твердый респиратор [Маск](#)

1. респиратор имеет лучшую конструкцию.
2. Двойная фиксированная лямка, регулируемая металлическая полоса носа.
3. гладкая внутренняя облицовка, обеспечивающая безопасную пломбу.
4. Высококачественная фильтрация и статические электрические материалы для сопротивления нормальной токсичной и Тинги-микронной частице.




## Функции

Проектирование

Многослойная ткань и мелтбловн, всего 4 слоя

Форма удержания алюминиевого ремня

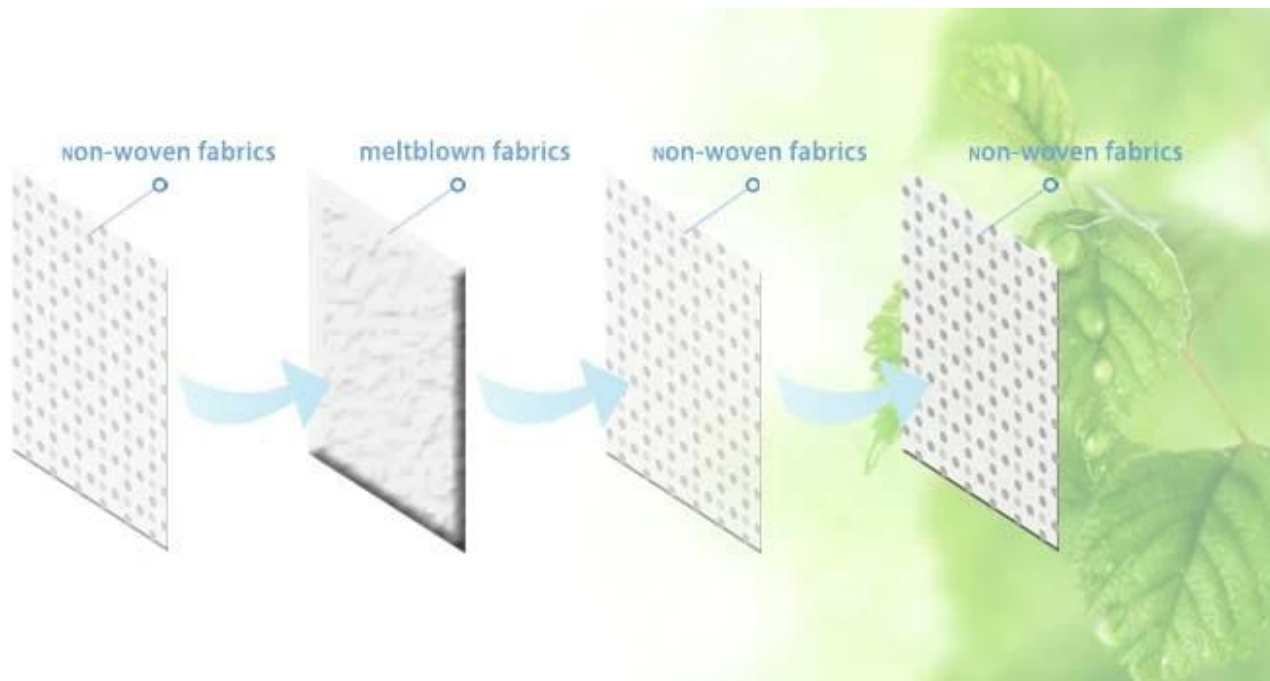

## Применимая область

Маски можно использовать для защиты нелетучих частиц, уменьшая запах некоторых органических соединений.

Не только вовремя изолировать бактерии, пыль в воздухе, дымку и лучше защитить дыхательные тракты и кожу лицевой стороны.

Не маслянистые частицы: пыль (минеральная собственность, металлическая пыльная волокно) пыльца и дымка, которые могут использоваться для защиты окружающей среды тонкодисперсных частицы ТЧ 2,5.

Не подходит для:

Респираторы не производят кислород, а не в условиях дефицита кислорода.

**Предупреждения:**

**Этот респиратор помогает защититься от определенных частиц, неправомерное использование может привести к болезни или смерти.**



## Действия по использованию

Выполнять гигиену рук перед помещением [Маск](#).

Выберите правильный размер маски и убедитесь, что нет дефектов.

1. Держите 103В в ладони с носепице на кончиках пальцев, которые свободно находятся под рукой.
2. Поместите 103В под подбородок с носепице.
- Держа 103В на месте, вытяните две лямки над каждым ухом.
3. и потяните обруч к другой лямке, сделайте ее на шее.
4. Если у вас длинные волосы, ремень должен быть расположен под вашими волосами. Поместите 103В низко в нос.
5. используя обе руки, носепице к форме носа, толкая вниз и наружу. При перемещении кончиков пальцев на обеих сторонах носепице.
6. Выполните проверку посадки, поместив обе руки целиком над маской. Будьте осторожны, не нарушайте позицию и выдохните резко. Если аирлеакс вокруг своего носа, настройте носепице, как описано в шаге 5. Если на краях маски протекает воздух, отрегулируйте ремни обратно по бокам головы. Повторно выполните проверку посадки, если корректировка выполнена.

### Помнишь:

Надеть правильный размер [Маск](#)

Проверка посадки обязательна для всех пользователей 103В маски и должна выполняться каждый раз при ношении.

Выполнить ручную гигиенафтер, надевая маску.

