


Çin'de yeni tasarım sıcak satış 102 Kafa maskesi toptan.

[maskelemek](#) yüz konturuna göre 3-D tasarım, omurga ve ağız ile sürtünme önlemek. Herhangi bir şekil tasarımı ile burun klipsi sızdırmazlık performansı bir dizi gelişmiş olduğunu. Yeterince ithal filtre malzemesi büyük ölçüde koruma etkisini artırmak. Parçacık solunum koruma için uygun, gibi: toz, mineral tozu, zararlı gazdan korunmak için kullanılmaz.



Özellikler:

İnsan vücudu mühendisliği 3D stereo tasarımı
Çok tabakalı dokunmamış kumaş ve eritilerek şişirilmiş, toplam 4 katman
Alüminyum kemer tutma şekli

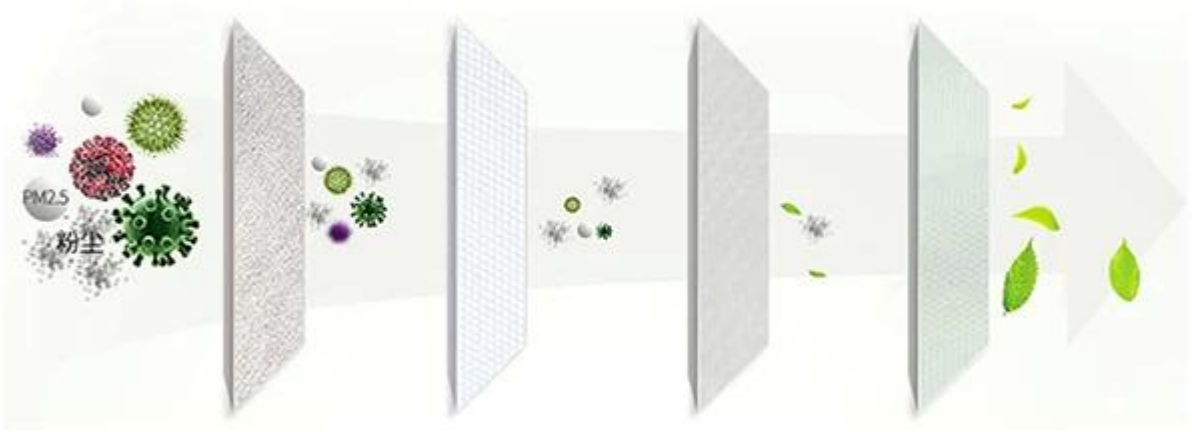

Geçerli kapsam

Maskeler, yağlı olmayan partikülleri korumak için kullanılabilir, bazı organik bileşiklerin kokusunu azaltır.

Sadece bakterileri, havadaki tozu, pusayı izole etmek için değil, solunum sistemini ve yüzdeki cildi daha iyi koruyabilir.

Yağlı olmayan partiküller: çevre hava kirliliğini korumak için kullanılacak toz (mineral özelliği, metalik toz fiber tozu) polen ve pus, ince parçacık PM 2.5.

Şunun için uygun olamaz:

Solunum cihazları oksijen içermeyen ortamda oksijen üretmez.

Warning:

Bu [solunum cihazı](#) Bazı parçacıklara karşı korunmaya yardımcı olur, yanlış kullanım hastalık veya ölümlerle sonuçlanabilir.



Kullanım adımları

1. Adım: Doğru seçimi yapın [solunum cihazı](#) Taktığınız boyut.
- Adım 2: Avucunuzu solunum cihazınızın halkalarına yerleştirin ve yüzünüzün üzerine koyun.
- Adım 3: Burun ve çene için solunum cihazını yerleştirin.
- Adım 4: Solunum cihazını tutan bir elinizle, ilk kayışı başın tepesine (kulakların üstüne) yerleştirmek için diğer elinizi kullanın, ardından ikinci kayışı boynun arkasına yerleştirin.
- Adım 5: Her iki elin iki parmağını kullanarak, metal köprünüzü burun köprüsünün konturuna göre aşağı doğru bastırın. (ASLA METAL PARÇA SİGORTASI!)
- Adım 6: Respiratörün her iki eliyle, etrafında sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için kuvvetle nefes verin.
- Adım 7: Güçlü nefes sırasında saçlarınız hareket ettiğinde sızıntı belirgindir. Gözlük takıyorsanız, camların buğulanması sızıntıya işaret eder.
- Adım 8: Hava sızıntısı varsa, tekrar test etmeden önce solunum cihazını, kayışları ve burun parçasını ayarlayın.

