

Yeni tasarım sıcak satış 102 baş maskesi toptan Çin.


Yüz dağılımına göre 3-b tasarım maskesi, thenose ve ağız ile sürtünme kaçının. Herhangi bir şekil tasarımı ile burun klip geliştirilmiş maskeleri sızdırmazlık performansı tam bir dizi. Etkili ithal filtre malzemesi büyük ölçüde koruma etkisini artırır. Partikül solunum koruması için uygun: toz, mineral tozu, zararlı gazın korunması için kullanılamaz.



Özellikleri:

İnsan vücudu Mühendisliği 3D stereo tasarım
Çok katmanlı Dokumasız Kumaş ve Meltblown, toplam 4 kat
Alüminyum kayış tutma şekli

4 layers protection

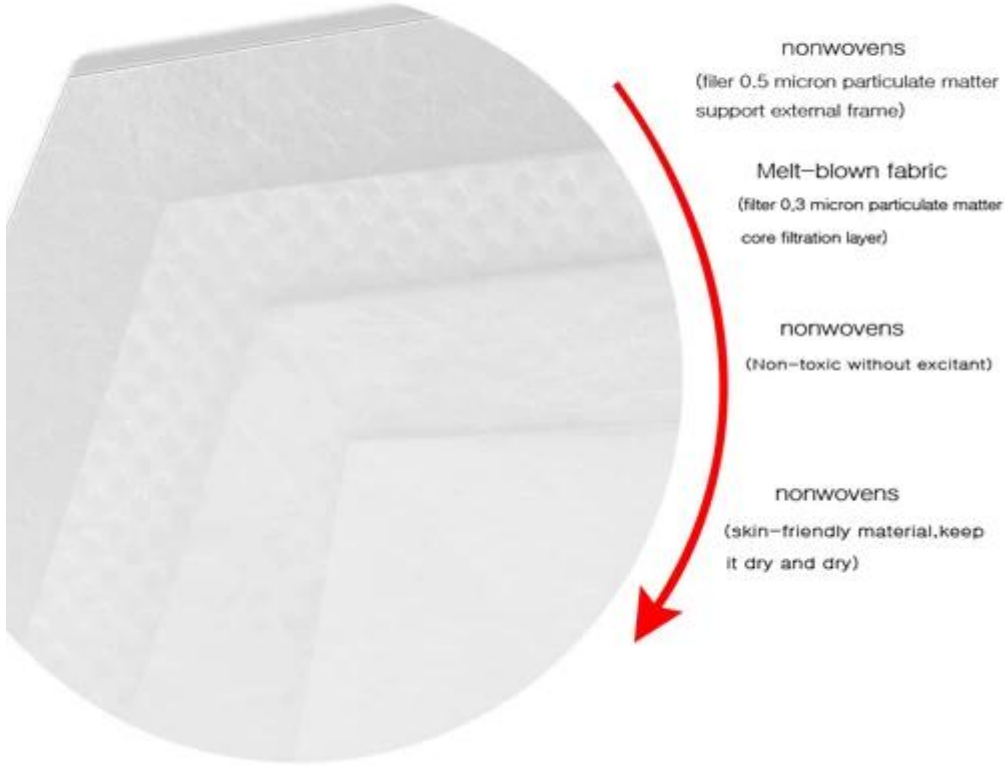

Uygulanabilir kapsam

Maskeler, bazı organik bileşiklerinin kokusunu azaltmak için yağlı olmayan partikülleri korumak için kullanılabilir.

Sadece zaman içinde bakteri izole etmek için değil, havada toz, pus, ve daha iyi solunum yolu koruyabilirsiniz, ve yüz cilt.

Non yağlı partiküller: toz (mineral özelliği, metalik toz fiber toz) polen ve Haze, çevre hava kirliliği ince partikül am 2,5 korumak için kullanabileceğiniz olabilir.

Uygun olamaz:

Solunum cihazı oksijen üretmez, oksijen eksikliği ortamında değil.

Warning:

Bu solunum cihazı belirli partiküllere karşı korunmaya yardımcı olur, yanlılık hastalık veya ölüme neden olabilir.

Guard your family and your health

Prevention of UV rays Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions



Kullanım adımları

1. Adım: uygun olan doğru solunum cihazı boyutunu seçin.
- Adım 2: yüzünüzün üzerinde sizin solunum döngüsü ve fincan üzerinden avuç yerleştirin.
- Adım 3: burun ve çene kapsayacak şekilde solunum cihazı konumlandırın.
- Adım 4: bir el solunum cihazı tutarak, diğer taraftan baş taç (kulakların üstündeki) üzerine ilk kayışı yerleştirin, daha sonra boynunun arkasına ikinci kayış yerleştirin.
- Adım 5: İki elin iki parmak kullanarak, burun köprüsü kontur göre metal parça aşağı basın. (asla metal parça çimdik!)
- Adım 6: her iki eliyle solunum üzerinde, etrafında sızıntı kontrol etmek için güçlü nefes.
- Adım 7: kaçak saç güçlü nefes sırasında hareket ettiğinde açıktır. Gözlükleri takarken, camların Fogging sızıntıyı gösterir.
8. Adım: hava sızıntısı belirtilirse, solunum, kayışlar ve burun parçasını tekrar test etmeden önce ayarlayın.



Solunum cihazını kaldırmak için:

- Adım 1: her iki eliyle, yavaşça boynunun etrafında ve başının üzerinde alt kayış kaldırın.
- Adım 2: üst kayışı kaldırın. Solunum cihazına dokunmayın.