

Vücut, obje ve ortam sıcaklığı için kızılötesi alın termometresi

1 ikinci ölçüm



Özellikleri

Medexpro JT004 termometre, daha fazla güvenilirlik, doğruluğu ve kolay kullanım, hastaya dokunmadan vücut ısısının yumuşak ve non-invaziv ölçüm sağlar.


1 saniye

Sadece 3 saniye içinde hızlı ve hassas ölçüm.

3in1

Çok

Alın, nesnel ve ortam sıcaklığı saniye cinsinden ölçümü.

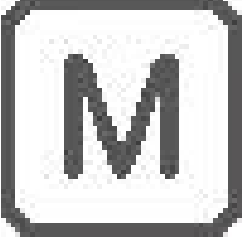

30 veri belleği

Son 30 ölçüm değerinin tarih ve saat ile otomatik olarak depolanması.



Belirtimi:

Sadece 1 saniyede dokunmatik içermeyen ölçüm.

Çok fonksiyonlu (gövde, cisim ve ortam sıcaklığı)
İzleme ışığı-geceleri de kolay kullanım için

Klinik olarak test edilmiş ve doktorlar tarafından tavsiye
Sessiz Glow™ teknolojisi ve ateş alarmı

Tarih ve saat ile büyük aydınlatılmış ekran
30 veri belleği (Tarih/saat ile saklanır)

Ses kontrolü (on/kapalı)
İsteğe bağlı: depolama çantası

Mod. No.: NC 150

Boyut: 141,1 x 43,3 x 36,9 mm

Ağırlık: 90g (pil ile), 67g (w/o pil)

Ölçüm aralığı: 0-100,0 °c


Ölçüm doğruluğu: ± 0,2 °c 36,0 ile 39,0 °c arasında

Pil: 2 x 1,5 V alkalin piller, boyutu aaa

Kullanıcı talimatları:

Adım 1:

Mod düğmesine basarak modu ve nesne modu arasında geçiş yapabilirsiniz. Güç düğmesine veya Başlat düğmesine basın, tam ekrandan sonra, termometre şimdi yeni bir ölçüm için hazırdır. Anormal bir ER1 veya ER2 görünür.

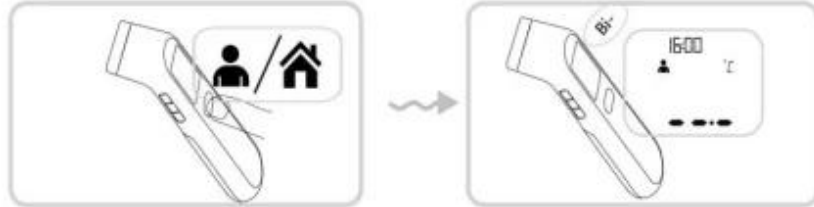

Adım 2:

Temporal arter karotis arter ile kalp bağlı. Bu yüzden temporal arter etrafında cilt yüzeyi ölçmek için tasarlanmıştır, baş bir büyük arter. 2 ila 3 cm mesafesi ile alınının merkezinde termometreyi hedefleyin ve ardından Başlat düğmesine basın. Not: son bip sesini işitmeden önce termometreyi alından çıkarmayın.



Adım 3:

Ekrandaki sıcaklığı okuyun.

1. sıcaklık okuma 37,8 °C (100,0 °F) altında ise, mutlu bir yüz okuma yanında görüntülenir.
2. Eğer sıcaklık okuma 37.8 °C (100,0 °F) veya üstü, kötü bir yüz okuma yanında görüntülenir.



Adım 4:

Pil ömrünü uzatmak için, test tamamlandıktan sonra cihazı kapatmak için güç düğmesine basın. Herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde, birim yaklaşık 1 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Termometreyi koruyucu kılıfında depolayın.