

## Yeni tasarım boyun maskesi VT103 toptan Çin

- Benzersiz şekil tasarımı düşük profil ve iyi uyum sağlar
- Kolay ayarlanabilen burun köprüsü sayesinde geliştirilmiş rahatlık
- Yüksek yoğunluk ve yüksek bozulma maskesi PM 2.5 için




### Özellikleri

İnsan vücudu Mühendisliği 3D stereo tasarım

Çok katmanlı Dokumasız Kumaş ve Meltblown, toplam 4 kat

Alüminyum kayış tutma şekli

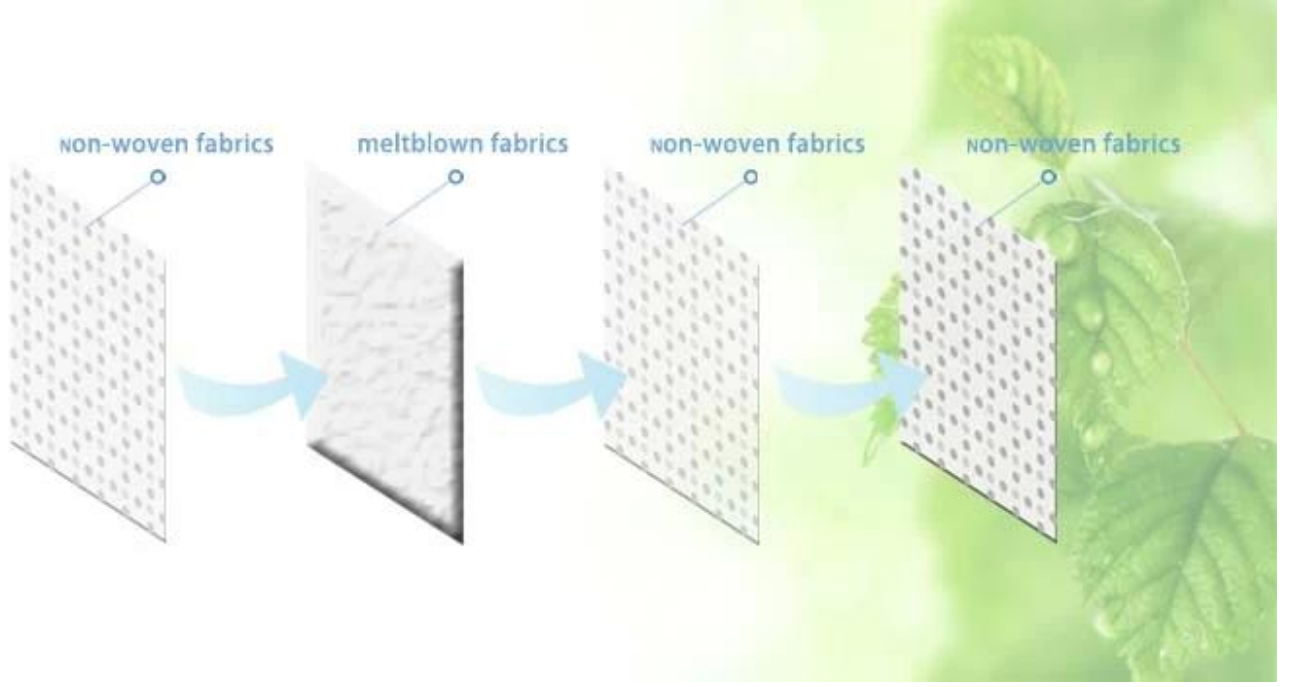

## Sınırlamalar ve uyarılar kullanın

1. takan ilk olarak uygun kullanımda eğitilmiş ve bu respiratior kullanmadan önce test edilmelidir.
  - 2.do bunu kullanmaz [Solunum](#) kirleticilerin konsantrasyonları hayat veya sağlık için hemen tehlikeli olduğunda.
  3. solunum zor hale gelirse hemen contaminted alanını bırakın, ya da baş dönmesi veya diğer sıkıntı oluşur.
  4. Eğer hasarlı veya solunum direnci aşırı olur Eğer
  5. iyi çalışma comdition sağlamak için her kullanımdan önce solunum cihazını inceleyin. İki kayış, noseclip ve zımba dahil olmak üzere hasar işaretlerinin tüm solunum parçalarını inceleyin.
- Bu solunum cihazını değiştirme, yıkama, suistimal veya kötüye 6.do
- 7.do, sakal veya diğer yüz tüyleri veya yüz ve solunum maskesinin sızdırmazlık kenarı arasında iyi bir mührü engelleyen diğer koşullarla kullanılmaz.


### **Uyarı:**

**Bu solunum cihazı belirli partiküllere karşı korunmaya yardımcı olur, yanlışlık hastalık veya ölüme neden olabilir.**

# Guard your family and your health

Prevention of UV rays Cool and comfortable

Suitable for a variety of occasions

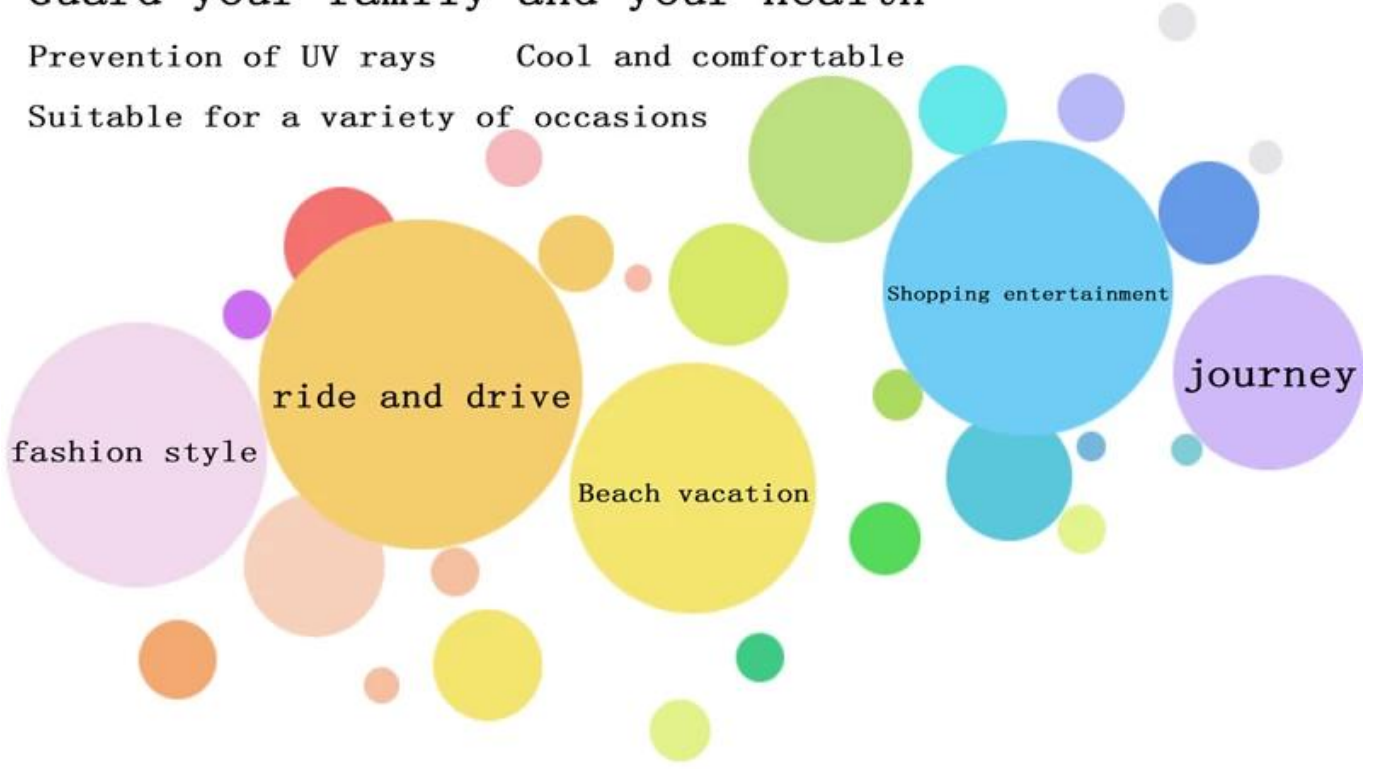

## Kullanım adımları

Yapmadan önce el hijyeni gerçekleştirin [maskesi](#).

Maskenin doğru boyutunu seçin ve hiçbir kusur olduğundan emin olun.

1. VT103 parmaklarınızın ucunda burun ile avuç içi tutun, el altında serbestçe kulak kayışları Hang.

2.103v burun ile çenenin altında konumlandırın.

VT103 yerinde tutarak iki kayışı her kulaktan çekin.

3. ve sonra başka bir kayış için çember çekin, boynunda yerinde yapmak.

4. Eğer uzun saç varsa, kayış saçınızı altında konumlandırılmış olmalıdır.

VT103 düşük pozisyonunu burnuna yerleştirin.

5. her iki elini kullanarak, burun aşağı ve dışa iterek burnunun şekle kalıp.

Parmaklarınızın ucunu burun her iki tarafında aşağı taşıırken.

6. her iki elini de maskenin üzerine yerleştirerek uygun bir çek uygulayın.

Pozisyonu rahatsız etmek ve keskin nefes almak için dikkatli olun.

Burnunun etrafında airleaks, burun adım 5 ' de anlatıldığı gibi ayarlayın.

Maske kenarlarında hava sızdırıyor ise, kayışları kafanın kenarları boyunca geri ayarlayın.

Bir ayarlama yaptıysanız, fit denetimi gerçekleştirin.

## Hatırlıyor:

Doğru büyüklükteki maskeyi takma

VT103 maskesinin tüm kullanıcıları için fit denetimi zorunludur ve her defasında aşınma yapılması gerekir.

El hygieneafter maske koyarak gerçekleştirin.

