

Çin üretici 103v partikül solunum boyun [maskesi](#)

1. solunum cihazı daha iyi bir tasarıma sahiptir.
2. çift sabit kayışlar, ayarlanabilir metal burun bandı.
3. pürüzsüz iç astar güvenli bir mühür sağlanması.
4. yüksek filtrasyon ve statik elektrik malzeme normal toksik ve Ting mikron partikül karşı.




Özellikleri

İnsan vücudu Mühendisliği 3D stereo tasarım

Çok katmanlı Dokumasız Kumaş ve Meltblown, toplam 4 kat

Alüminyum kayış tutma şekli

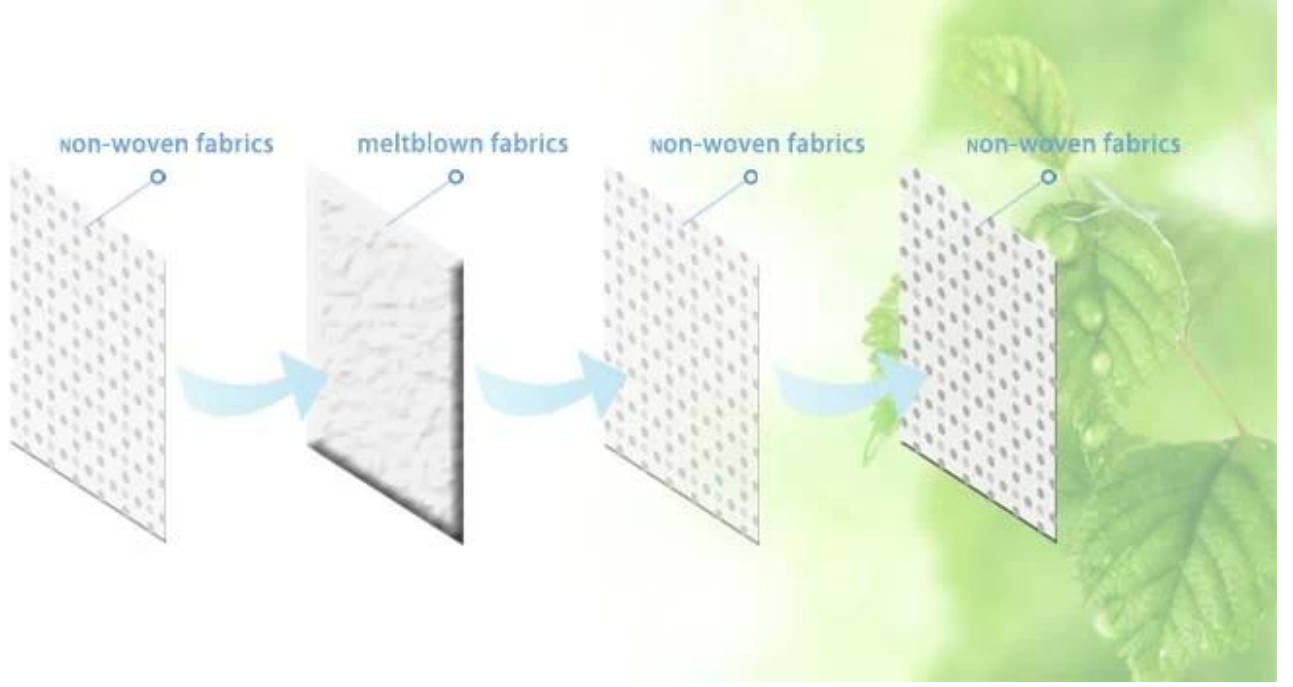

Uygulanabilir kapsam

Maskeler, bazı organik bileşiklerinin kokusunu azaltmak için yağlı olmayan partikülleri korumak için kullanılabilir.

Sadece zaman içinde bakteri izole etmek için değil, havada toz, pus, ve daha iyi solunum yolu koruyabilirsiniz, ve yüz cilt.

Non yağlı partiküller: toz (mineral özelliği, metalik toz fiber toz) polen ve Haze, çevre hava kirliliği ince partikül am 2,5 korumak için kullanabileceğiniz olabilir.

Uygun olamaz:

Solunum cihazı oksijen üretmez, oksijen eksikliği ortamında değil.

Uyarı:

Bu solunum cihazı belirli partiküllere karşı korunmaya yardımcı olur, yanlışlık hastalık veya ölüme neden olabilir.



Kullanım adımları

Yapmadan önce el hijyeni gerçekleştirin [maskesi](#).

Maskenin doğru boyutunu seçin ve hiçbir kusur olduğundan emin olun.

1.103v parmaklarınızın ucunda burun ile avuç içi tutun, el altında serbestçe kulak kayışları Hang.

2.103v burun ile çenenin altında konumlandırın.

103v yerinde tutarak iki kayışı her kulaktan çekin.

3. ve sonra başka bir kayış için çember çekin, boynunda yerinde yapmak.

4. Eğer uzun saç varsa, kayış saçınızı altında konumlandırılmış olmalıdır.

103v düşük pozisyonunu burnuna yerleştirin.

5. her iki elini kullanarak, burun aşağı ve dışa iterek burnunun şekle kalıp.

Parmaklarınızın ucunu burun her iki tarafında aşağı taşıırken.

6. her iki elini de maskenin üzerine yerleştirerek uygun bir çek uygulayın.

Pozisyonu rahatsız etmek ve keskin nefes almak için dikkatli olun.

Burnunun etrafında airleaks, burun adım 5 ' de anlatıldığı gibi ayarlayın.

Maske kenarlarında hava sızdırıyor ise, kayışları kafanın kenarları boyunca geri ayarlayın.

Bir ayarlama yaptıysanız, fit denetimi gerçekleştirin.

Hatırlıyor:

Sağ ebatta aşınma [maskesi](#)

103v maskesinin tüm kullanıcıları için fit denetimi zorunludur ve her defasında aşınma yapılması gerekir.

El hygieneafter maske koyarak gerçekleştirin.

