

Perfektní design v Číně VT103 krk maska výrobce

- Jedinečný tvar konstrukce umožňuje nízký profil a dobrou kondici
- Zvýšený komfort díky snadno nastavitelnému nosníku mostu
- Vysoká hustota a vysoká degradací maska pro PM2, 5




Funkce

Lidské tělo inženýrství 3D Stereo design

Vícevrstvá netkané textilie a meltblown, celkem 4 vrstvy

Hliníkový pás drží tvar

4 layers protection

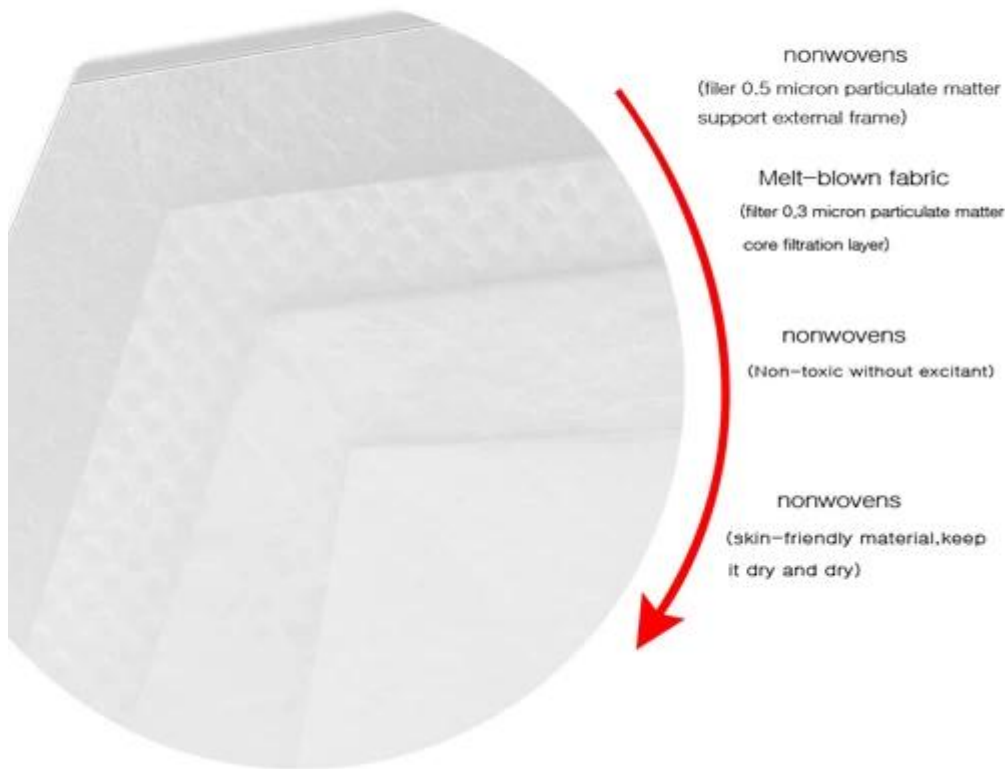

Omezení použití a upozornění

1. před použitím tohoto respirátoru je třeba nejprve vytrénovat uživatele ve správném používání a fit.
2. Nepoužívejte tento respirátor, pokud koncentrace kontaminujících látek jsou okamžitě nebezpečné pro život nebo zdraví.
3. Pokud se dýchání stane obtížným, ponechte kontaminovanou oblast okamžitě, nebo dojde k závratě nebo jinému strachu.
4. vyhodte a nahraďte respirátor, pokud dojde k jeho poškození nebo k nadměrnému odporu dýchání.
5. Zkontrolujte respirátor před každým použitím, aby bylo zajištěno, že je v dobré pracovní podmínce. Zkontrolujte všechny respirátor díly pro známky poškození, včetně dvou popruhů, noseclip a sponky.
6. nesmí měnit, mýt, zneužívat nebo zneužívat tento respirátor.
7. nepoužívejte s vousy nebo jinými obličejovými vlasy nebo jiné podmínky, které brání dobré utěsnění mezi obličejem a těsnicím okrajem respirátoru.

Upozornění:

Tento respirátor pomáhá chránit před některými částicemi, zneužití může mít za následek nemoc nebo smrt.

No longer do the human vacuum cleaner



Kroky pro použití

Před uvedením masky proveďte hygienu rukou.

Zvolte správnou velikost masky a ujistěte se, že nejsou žádné vady.

1. Držte VT103 v dlani s hlavici na dosah ruky, pověsit ušní popruhy volně pod rukou.

2. Umístěte 103v pod bradu s hlavici nahoru.

Zatímco držíte VT103 na místě, vytáhněte dva popruhy přes každé ucho.

3. a pak vytáhněte obruč na jiný popruh, aby to na místě na krku.

4. Pokud máte dlouhé vlasy, popruh musí být umístěn pod vlasy.

Umístěte VT103 nízko na nose.

5. pomocí obou rukou, plísň hlavici na tvar nosu tím, že tlačí dolů a ven.

Při pohybu prstů po obou stranách hlavici.

6. proveďte kontrolu lícování umístěním obou rukou přes masku.

Dávejte pozor, abyste nenarušili pozici a vydechujte ostře.

Pokud se rozteče kolem nosu, upravte hlavici tak, jak je popsáno v kroku 5.

Pokud se vzduch na okrajích masky nevrací, nastavte pásy zpět po stranách hlavy.

Proveďte kontrolu vhodnosti znovu, pokud je provedena úprava.

Si:

Noste správnou velikost masky

Kontrola fit je povinná pro všechny uživatele VT103 masky a musí být provedena pokaždé, když na sobě.

Provést ruční hygienu po uvedení na masku.

